

Leaf Self Expander®



Selbstaktivierende blattfederaktivierte Apparatur für eine mitarbeitsfreie maxilläre Expansion




Modifizierte Variante des Leaf Expander®, die gänzlich ohne eine Re-Aktivierung (auch nicht durch den Behandler) auskommt. Schraubenlos, basiert die Wirkung dieser innovativen Expansionsapparatur ausschließlich auf der Elastizität der – je nach Ausführung – vier bzw. sechs integrierten MEMORIA® NiTi-Blattfedern. Auch beim selbstaktivierenden Leaf Self Expander® sind zwei verschiedene Modelle mit einem maximalen Dehnweg von 6 mm oder 9 mm erhältlich, die je mit einer wählbaren Kraftabgabe von 450 g oder 900 g verfügbar sind.

Die Vorteile auf einen Blick


- mitarbeitsfreie maxilläre Expansion
- selbstaktivierende Apparatur – keine Re-Aktivierung der Blattfedern erforderlich
- vordefinierte, vollständig kontrollierte und konstante Kraftabgabe
- 2 Modelle erhältlich (mit 4 bzw. 6 MEMORIA® NiTi-Blattfedern)
- 2 wählbare Kraftoptionen (450 g oder 900 g)
- Lasermarkierungen auf dem Schraubenkörper zur leichteren Identifizierung:
 - Expansionskapazität in mm
 - Kraftangabe
- Lieferung inklusive Fixierclip mit Sicherheitslasche (um Blattfedern komprimiert zu halten)

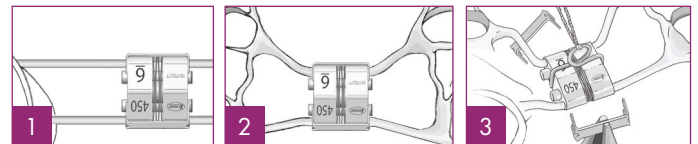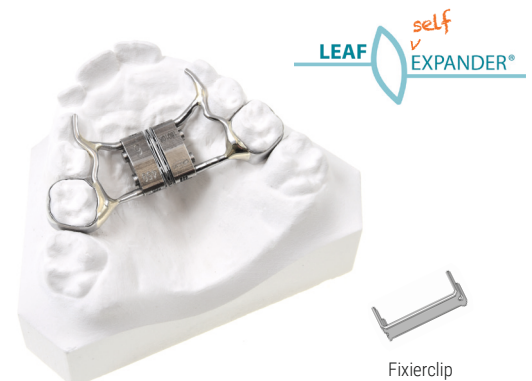


Downloads / Weitere Informationen

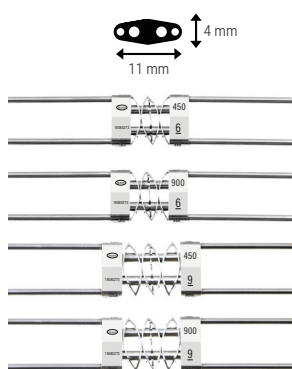

Blattfedern	Körper	Ø Arme	VPE	Art.-Nr.	
4 (450 g)	11 mm	1,5 mm	6 mm	1	A2705-06
4 (900 g)	11 mm	1,5 mm	6 mm	1	A2706-06
6 (450 g)	15 mm	1,5 mm	9 mm	1	A2705-09
6 (900 g)	15 mm	1,5 mm	9 mm	1	A2706-09

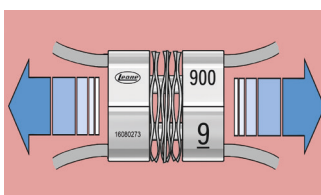

Behandlungsbeginn

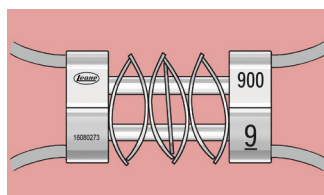

Behandlungsende