

24.-30. NOVEMBER 2023

# BLACK WEEK

## AKTION

NEU


### Esmail Eruptor™

esmail  
erupT<sup>or</sup>

Innovative Durchbruchhilfe von partiell eruptierten Zähnen (z.B. Eckzähne oder zweite Molaren) im Rahmen einer Multibandbehandlung. Während Brackets je nach Durchbruchgrad nur eingeschränkt geklebt werden können und immer wieder repositioniert werden müssen, ermöglicht dieses hilfreiche Tool sogleich die maximale (Single-Tube) bzw. schrittweise (Double-Tube) Aktivierung des NiTi-Bogens.

- einzigartiges Slotdesign mit Single- oder Double-Tube
- 80-Gauge-Gitternetzbasis für optimale Haftkraft
- kein (sukzessives) Neupositionieren von Brackets
- kein Abwarten des vollständigen Zahndurchbruchs
- vollständige Bogenaktivierung von Beginn an (Single-Tube)
- sequenzielle Bogenaktivierung bei hochstehenden Zähnen (Double-Tube)

#### Single-Tube

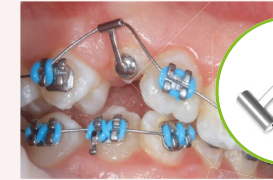

#### Double-Tube



Dentalline

36 €  
Einführungspreis

je 10 Stück

Single-Tube Art.-Nr.: DL290050

Double-Tube Art.-Nr.: DL290051

### Alpha-Glaze®

UV-Licht-polymerisierender Versiegler zum wirksamen Schutz vor Demineralisation. Das ungefüllte Dentalresin auf Methacrylat-Basis durchdringt Mikrorisse und Unebenheiten und versiegelt diese dauerhaft. Es eignet sich insbesondere zur kariespräventiven Behandlung der Schmelzoberfläche vor dem Einbringen kieferorthopädischer Behandlungsapparaturen (Bracketumfeldversiegelung).

- farblos
- lichthärtend
- fluoridfreisetzend
- optimale Viskosität
- kariespräventive, dauerhafte Versiegelung
- verfärbungsresistent
- kompatibel mit allen gängigen Klebesystemen



25 €  
statt 33,- €


1 Fläschchen (7 ml)  
Art.-Nr.: DL600048

### Distal End Cutter Flush Cut

carl  
marlin

Dank seiner Hartmetalleinsätze gewährleistet dieses Schneideinstrument ein äußerst präzises Kürzen von Bogenenden in der Multibandtechnik. Die spezielle Drahtfangvorrichtung sorgt dabei für ein patientensicheres Halten der abgetrennten Drahtteile.

- bündiges Schneiden zum Bukkalröhrchen oder Bracket
- sicheres Halten der Bogenenden
- für Drähte bis max. .022" x .028" / 0,56 mm x 0,71 mm

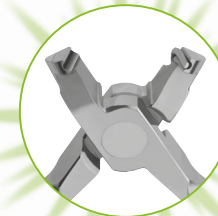

115 €  
statt 159,90 €

1 Stück  
Art.-Nr.: DL703114

## Gesichtsmaske nach Dr. Henri Petit

Extraorale Apparatur zur Behandlung von Klasse III-Malokklusionen, deren Design für einen höchstmöglichen Tragekomfort zur Förderung der Therapietreue entwickelt wurde. Durch ihre ergonomische Form sowie aufgrund der vollen, leicht realisierbaren Justierbarkeit lässt sich die Gesichtsmaske ideal an das Gesicht des Kindes oder des erwachsenen Patienten anpassen. Kopfteil und Kinnkappe sind mit Schaumstoff beschichtet und können entweder blockiert oder freigegeben werden.



- für Kinder (ab 4 Jahren) und Erwachsene geeignet
- voll justierbar
- aus Edelstahl mit verstärkter Querstange
- hohe Haltbarkeit
- geringes Gewicht
- gepolsterte Auflagen
- maximaler Patientenkomfort
- voller Bewegungsspielraum
- mit Belüftungsöffnungen
- verschiedene Farben und Muster
- Maske inklusive Austauschpads und Inbus-Schlüssel



## Wangenhalter

Selbsthaltender Retraktor für ein optimales intraorales Agieren bei uneingeschränkter Sicht. Der in verschiedenen Größen und Farben erhältliche Wangenhalter ist insbesondere für das direkte Bonding bestimmt. Er verfügt über eine Lasche sowie seitliche Griffe, die ein leichteres Einbringen in den Mund sowie durch Ziehen der Wange selbst im Seitenzahnbereich eine ideale Sicht ermöglichen.

- beste intraorale Zugänglichkeit zu den Zähnen
- zuverlässiges Fernhalten von Ober- und Unterlippe
- Materialien: Polypropylen (weich) und Polycarbonat (starr) in medizinischer Qualität
- erhältlich in 3 Größen (klein, mittel, groß) für maximalen Patientenkomfort
- verfügbar in 5 Farben sowie transparent (ideal für klinische Fotos)
- autoklavierbar bei 121°C oder kalt sterilisierbar

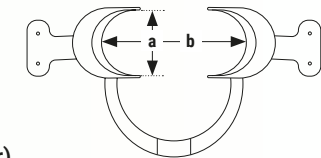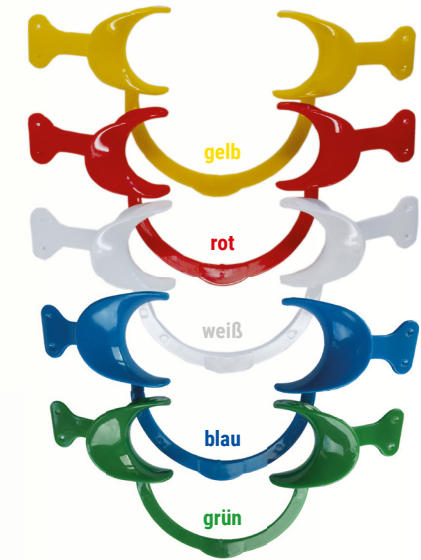

### farbig (starr)

Größe	a	b	Art.-Nr.
small	32 mm	65 mm	ECM1333 + Farbe*
medium	36 mm	90 mm	ECM1334 + Farbe*
large	46 mm	100 mm	ECM1335 + Farbe*

\*Bitte ergänzen Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe.



### transparent / milchig

Größe	a	b	transparent (starr)	milchig (weich)
small	32 mm	65 mm	ECM1337-S	ECM1338-S
medium	36 mm	90 mm	ECM1337	ECM1338-M
large	46 mm	100 mm	ECM1337-L	-